

# Lifenaxx® \* Uživatelská příručka

## Kompaktní přístroj na masáž svalů LX-013

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (ve spodní liště "Konformitätserklärung") Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 013643 (14 centů / minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

**Záruka 2 roky**

### Funkce

- LifenaXX LX-013 je bezšňůrové vibrační zařízení na masáž svalů, které uvolňuje bolavé tuhé svaly, zvyšuje krevní oběh a rozsah pohybu a zlepšuje celkové zdraví měkkých tkání těla.
- 6 rychlostí s1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200rpm.
- 12V baterie s 1500mAh
- 180 min. pracovní doba
- 5 různých masážních hlav
- Automatické vypnutí po 10 minutách.

### Technické údaje


Vstup AC adaptéru (pouze pro vnitřní použití)	230V
Výstup AC adaptéru	12,6V / 0,8A
Baterie	12V / 1500mAh

## Normální použití

Pouze pro dospělé.

- Přepněte baterii do polohy „ON“(ZAP), kontrolka baterie se rozsvítí zeleně (pokud je baterie dostatečně nabitá). Pokud kontrolka svítí červeně, nabijte baterii.
- Nainstalujte 1 z 5 hlav podle svých potřeb.
- Používejte pouze na suchý čistý povrch těla nad oděvem lehkým stlačením a pohybem po těle přibližně 60 sekund v jedné oblasti.
- LifenaXX LX-013 používejte pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž byste vyvolali bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavu ani na žádné tvrdé nebo kostnaté oblasti těla.
- Používejte pouze aplikátory, které poskytují nejlepší požadovaný efekt.
- K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení regulace nebo aplikovaný tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
- Prsty, vlasy nebo jiné části těla udržujte mimo hřidel a zadní stranu aplikátoru, protože by mohlo dojít k sevření.

## Přehled produktu

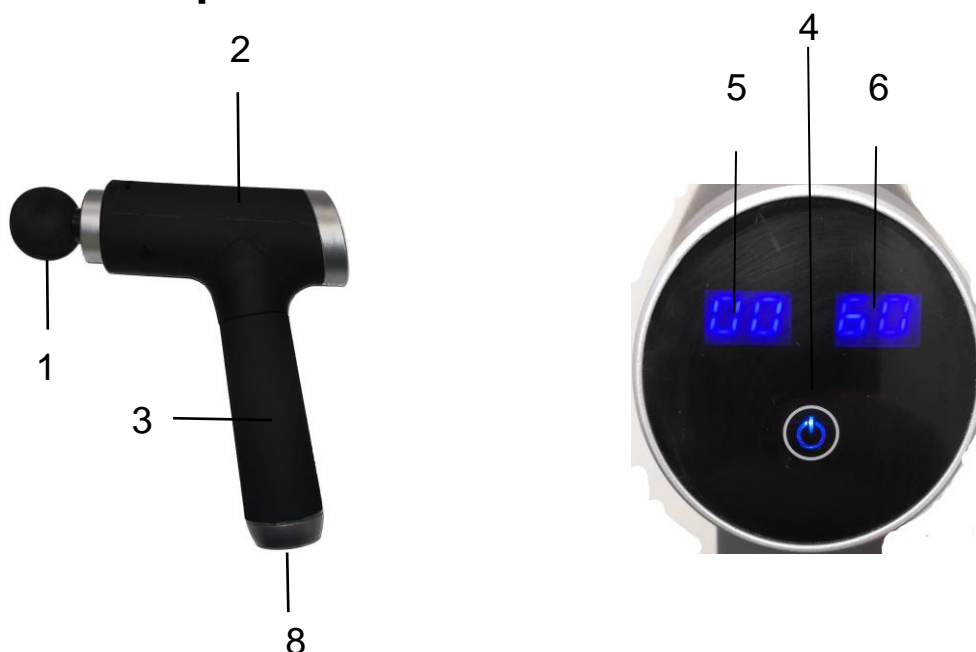

1	Masážní hlava	5	LED kontrolka pro rychlost
2	Vysokorychlostní motor s měkkým startem	6	LED kontrolka baterie
3	Baterie	8	Spínač baterie

4	Tlačítko start a úroveň		
---	-------------------------	--	--

## Hlavy zleva doprava



<b>Vidlicová hlavice</b>	vhodná pro svaly a měkké tkáně na obou stranách páteře
<b>Plochá hlavice</b>	vhodná pro všechny části těla (svaly a měkké tkáně)
<b>Globální hlavice</b>	vhodné pro svalové skupiny a měkké tkáně
<b>Kulovitá hlavice</b>	vhodné pro muskulaturu a měkké tkáně v blízkosti kloubů
<b>Měkká gumová hlavice</b>	vhodná pro všechny části těla (svaly a měkké tkáně)

## Instalace hlavice

Vyměňte masážní hlavici podle potřeby. Chcete-li to provést, vyjměte původní hlavici (levý obrázek) a vložte další do držáku (pravý obrázek)



## Bezpečnostní instrukce

- Nabíjejte pouze pomocí dodané AC nabíječky.
- Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a / nebo chybějícími odbornými znalostmi.
- Zařízení není určeno pro komerční použití.
- Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné

a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

→ Nikdy nenechávejte LifenaXX LX-013 v provozu nebo nabíjení bez dozoru.

### PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE LIFENAXX LX-013 V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU LÉKAŘE:


těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nošení kardiostimulátorů, nedávný chirurgický výkon, epilepsie nebo migréna, herniovaný disk, spondylolistéza, spondylolyza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů nebo vyjmutí spirály, kovové šrouby nebo pláty v těle, nebo pokud máte nějaké obavy ohledně vašeho fyzického zdraví. Tyto kontraindikace neznamenaají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební vybavení. Doporučujeme však nejprve konzultovat s lékařem. V současné době se studují účinky vibračních aplikací na určité zdravotní stavy. To pravděpodobně povede ke snížení výše uvedeného seznamu kontraindikací. Praxe ukázala, že integrace vibračních aplikací do léčebného plánu je v řadě případů vhodná. To musí být provedeno na doporučení a za pomoci lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.

### UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ:

Použití pouze pro dospělé, aplikujte na suchý, čistý povrch těla přes oděv lehkým tlakem a pohybem po těle. Doba aplikace by neměla přesáhnout 60 sekund na jednu oblast těla. LX-013 používejte pouze na měkké tkáně a svaly těla, pokud cítíte bolest nebo nepohodlí, zastavte proceduru. Používejte pouze dodané aplikátory. Otlaky mohou nastat bez ohledu na nastavení, ovládání nebo aplikovaný tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí. Prsty, vlasy nebo jiné části těla udržujte mimo hřidel a zadní stranu aplikátoru, protože by mohlo dojít k sevření. Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo na přímém slunečním světle. Po celou dobu uchovávejte zařízení v suchu, a když se nepoužívá, odpojte ho. Neponořujte zařízení do vody. Časté vysokorychlostní a vysokotlaké stimulace na stejném místě mohou způsobit otěry. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, přestaňte zařízení okamžitě používat. Při nabíjení se ujistěte, že zařízení není v provozním stavu!

**Rady pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie

CE

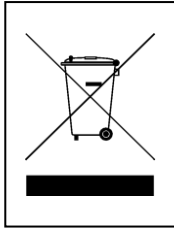

do domovního odpadu.. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (použijte čistou přikrývku). Vyhněte se používání hrubých, abrazivních čisticích prášků a rozpouštědel nebo agresivních čistidel. Zařízení po vyčištění dobře otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo