

# Lifenaxx<sup>®</sup> \* Uživatelská příručka

## Wlan Otoskop LX-032

Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) ("Konformitätserklärung" na spodní liště). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

**Záruka 2 roky**

Tento výrobek je určen k použití u lidí a zvířat. Výrobek lze používat pouze k čištění a kontrole zvukovodu nebo nosní dutiny. Při používání zařízení dávejte pozor, abyste nepronikli příliš hluboko do otvorů, mohlo by dojít k poškození.

### Vlastnosti


- CMOS videokamera 3MP
- Rozlišení 1920 x 1080P 30FPS.
- 6osý gyroskop
- Zaostřovací vzdálenost 1,5-2cm
- Indikátor nabití baterie


### Technické specifikace

USB (pouze v suchém stavu)	5V max. 0,2A
Baterie	3,7V / 250mAh
Kamera	3MP 1920x1080 30FPS
Provozní doba	60 min
Doba nahrání	90 min
WLAN	Přenosová vzdálenost ~8 m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný výkon max. 20mW
Kontrolka LED	6
Průměr čočky	3,9mm
Rozměry	Ø1.3x 14cm
Hmotnost	17g









### První použití

● Nahrajte zařízení plně pomocí kabelu USB, může to trvat až 90 minut. ● Otevřete obchod APP store a vyhledejte aplikaci iTiMO. ● Nainstalujte aplikaci do zařízení a otevřete ji.

● Spusťte otoskop. ● Stiskněte symbol . ● Nové okno otevře všechna dostupná připojení Wlan (Android). U zařízení IOS otevřete nabídku nastavení, Wi-Fi. ● Vyberte zařízení iTiMO-xxxx device, můžete obdržet varování, že v této síti není k dispozici žádná internetová služba.

● Poté přejděte na aplikaci iTiMO a znovu stiskněte tlačítko . Nyní uvidíte živé video z kamery otoskopu. ● Připojte čisticí lžičku podle svého výběru a začněte opatrně čistit. ● Doporučujeme umístit telefon/tablet do držáku v přímém zobrazení.

## APLIKACE

	Zastavit skutečný obrázek
	Spustit živé video
	Pořídit snímek
	Spustit nebo zastavit nahrávání videa
	Otevřít galerii, zde najdete nahrané fotografie a videa.
	převeďte vás o krok zpět
	Nastavení
	Změna zprava doleva

## Normální použití

- Otoskop by měl být zasunut do zvukovodu, pouze když je nasazena lžice.
- Položte lžici na otoskop tak, aby lžice pevně seděla.
- buďte opatrní zvukovod a nos jsou citlivé.

## Čištění


Před a po použití byste vyčistěte kameru.

## Bezpečnostní instrukce

→ Nedívejte se do LED světla. → Nabíjejte pouze pomocí dodané nebo kompatibilní USB nabíječky. → Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a / nebo chybějícími odbornými znalostmi. → Zařízení není určeno pro komerční použití. → Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné a představuje významné riziko. → Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Před použitím zkontrolujte správnou funkci zařízení! → Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození → Nepoužívejte zařízení v oblastech s nebezpečím požáru nebo výbušnin (např. v prostředí nasyceném kyslíkem nebo v anestezii). → Tento produkt nesmí vstupovat nebo být používán v oblastech se silnými magnetickými poli, např. MRI skenery. → Zařízení neupravujte. → Nikdy nenechávejte zařízení v procesu nabíjení bez dozoru.

## UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ:

Pouze pro dospělé, nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu. Neponořujte zařízení do vody.

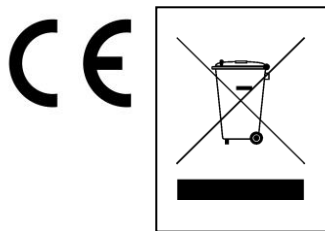

**Rady pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení nebo baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (používejte čisté závěsy). Nepoužívejte drsné hrubozrnné materiály nebo rozpouštědla/agresivní čisticí prostředky. Řádně vyčistěte čištěné zařízení. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo